

Fiche Technique

PIEGE A POLYPES

Neotrap®

Manchon recueil pièce anatomique par aspiration UU

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A67AA07

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables
inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : I

Réglement applicable : 2017/745


N° Organisme notifié : NA

Première mise sur le marché de l'UE : 2024

Fabricant : Yangzhou Fartley Medical

Provenance : Chine

Statut d'Asept InMed : Importateur

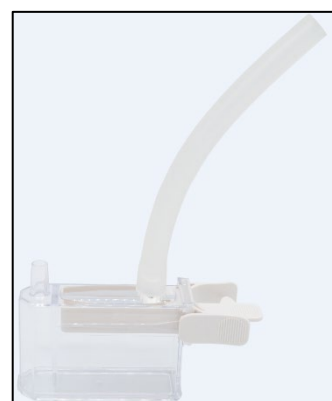

Descriptif du dispositif :

Piège à polypes utilisé pour le recueil et le transport de polypes enlevés lors d'une procédure endoscopique.

Il est composé de deux tiroirs filtrants amovibles pour le recueil des polypes. Sa conception permet de faire circuler le fluide dans le réceptacle d'aspiration principal.

Une fenêtre de grossissement est présente permettant une visualisation directe de l'échantillon collecté.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence AIM	Code UDI
Piège à Polypes	400705005 FTL-PTCO-2-1	222572	16936603228996

Conditionnement :

Conditionnement de vente : boîte de 25 unités

Basic UDI-DI : 69709008510147Y

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Tube	Matériau : Polychlorure de vinyle (PVC)
Elément : Boitier et plaque	Matériau : polystyrene (PS)
Elément : Chambre à polypes	Matériau : Acrylonitrile butadiène styrene (ABS)
Elément : Bague d'étanchéité	Matériau : Caoutchouc de silicone

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phthalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Endoscopie

Indications :

Endoscopie digestive

Dispositif positionné en ligne du canal de l'endoscope pour permettre de récupérer les polypes par aspiration sous endoscopie. Il peut être composé d'une à plusieurs logettes de récupération.

2 PROCEDE DE STERILISATION : Produit non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr