

Caractéristiques techniques

Casaque de chirurgie renforcée avec passe-pouce

Caractéristiques produit

Casaque de chirurgie renforcée avec passe-pouce :


- Poignets jersey avec passe-pouce
- Dos croisé
- Encolure ovalisée ajustable par attaches auto-agrippantes
- 2 essuie-mains
- Carte de transfert bicolore
- Long plastron imperméable descendant sous les genoux
- Manches avec renforts imperméables et respirants

Matériaux:

SMS 48 g/m² antistatique

Renfort en PE/PP pour le plastron

Renfort en PE/PP respirant pour les manches

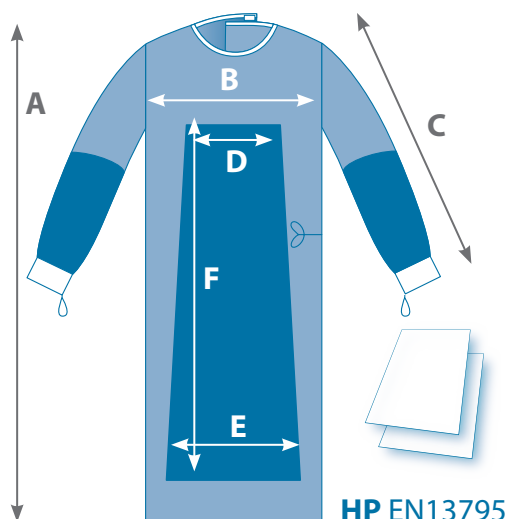

HP EN13795

Domaines d'application

Tenue de bloc pour le personnel soignant assurant une protection supérieure contre tout risque de contamination microbienne peropératoire. Pour des interventions chirurgicales de longue durée, humides ou compliquées au bloc opératoire.

Dimensions et codes articles

Code article	Longueur (A)	Largeur poitrine (B)	Longueur manches (C)	Plastron (DxExF)
VO13 L	140 cm	64 cm	61 cm	40x70x110 cm
VO13 XL	150 cm	68 cm	63 cm	40x70x125 cm
VO13 XLL	161 cm	68 cm	63 cm	40x70x125 cm
VO13 XXL	153 cm	73 cm	64 cm	40x70x125 cm

Tolérance : +/- 3%

Informations normatives

Dispositif médical à usage unique de classe Is, conforme au règlement DM UE 2017/745

Conforme à la norme EN 13795 haute performance.

Sans latex et sans phtalates.

Code ClaDiMed : E50AD02
Code GMDN : 35091



D73-02-FTVO13
Version 1.2 / 02-2018

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque produit est emballé sous

☐ simple emballage avec sachet pelable

☒ double emballage avec feuille de stérilisation et sachet pelable.

Tous les produits sont regroupés dans un sac plastique et carton de transport.

Stockage : Date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine (5°-35°C).

Conditionnement	Quantité	Dimensions	Poids net	Poids brut
Carton :	24 pcs	38x27x51 cm		
Palette de 24 cartons:	576 pcs	120x80x168 cm		

Stérilisation

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Validité du produit 5 ans après la stérilisation.