

SERINGUE LUER LOCK PREREMPLIE (NaCl 0,9%)

Easy-flush®

Seringue 3 pièces Luer verrouillable

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :

K54BB03

Code LPPR* si applicable :

Eligible à la nomenclature PERFADOM

Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1*Classe du DM :**

Iib

**Bleu : stérilité interne & externe
(Packaging papier/film)****Règlement applicable :**

2017/745

N° Organisme notifié :

0123

Première mise sur le marché de l'UE :

11/2025

Fabricant :


SPM Medicare

Provenance :

Inde

Statut AIM:

Importateur

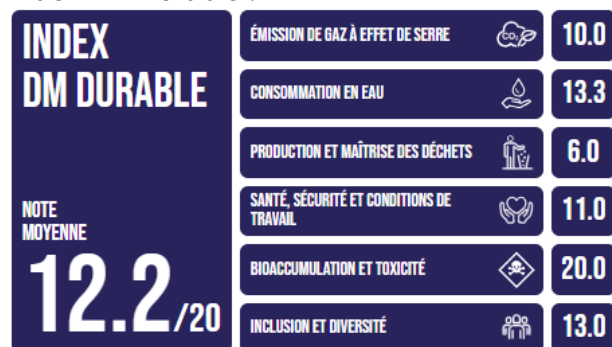Index DM Durable :

Méthodologie : AFNOR SPEC 2313 Index DM Durable - Méthodologie de calcul de critères environnementaux et sociaux appliqués aux dispositifs médicaux - Juin 2025

**Vert : stérilité interne
(Packaging fourreau film)**

Descriptif du dispositif :

La seringue saline de rinçage est une seringue préremplie en polypropylène contenant une solution stérile et apyrogène de chlorure de sodium (solution saline) à 0,9 % p/v. Il s'agit d'un dispositif médical stérile, à usage unique, non toxique, stérilisé par irradiation gamma.

La gamme comprend des seringues de même diamètre (égal à celle de 10ml) et préremplies de sérum physiologique (solution saline, NaCl 0,9%) de différents volumes : 3 / 5 / 10 / 20 / 50 mL.

Fiche technique

Date : 08/2026 Version 2

Références Catalogue :

Désignation du produit	Volume	Référence fournisseur	Référence AIM	UDI-DI	Cdt (unités / boîte)
EASY-FLUSH® IN SERINGUE SALINE STERILE INTERNE	3mL	1BO7R3S	203252	8904379807890	50
EASY-FLUSH® IN SERINGUE SALINE STERILE INTERNE	5mL	1BO7R5S	203253	8904379807937	50
EASY-FLUSH® IN SERINGUE SALINE STERILE INTERNE	10mL	1BO7RXS	203254	8904379807975	40
EASY-FLUSH® IN SERINGUE SALINE STERILE INTERNE	20mL	1BO7RYS	203258	8904379809030	65
EASY-FLUSH® IN SERINGUE SALINE STERILE INTERNE	50mL	1BO7RZS	203260	8904379809054	30
Désignation du produit	Volume	Référence fournisseur	Référence AIM	UDI-DI	Cdt (unités / boîte)
EASY-FLUSH® IN/OUT SERINGUE SALINE STERILE INTERNE/ EXTERNE	3mL	1BV7B3D	203255	8904379807920	50
EASY-FLUSH® IN/OUT SERINGUE SALINE STERILE INTERNE/ EXTERNE	5mL	1BV7B5D	203256	8904379807968	50
EASY-FLUSH® IN/OUT SERINGUE SALINE STERILE INTERNE/ EXTERNE	10mL	1BV7BXD	203257	8904379808002	40
EASY-FLUSH® IN/OUT SERINGUE SALINE STERILE INTERNE/ EXTERNE	20mL	1BV7PYD	203259	8904379809047	40
EASY-FLUSH® IN/OUT SERINGUE SALINE STERILE INTERNE/ EXTERNE	50mL	1BV7PZD	203261	8904379809061	20

Basic UDI : 89043798FSHE

Composition du dispositif, accessoires et emballages :

Produit principaux composants et matériaux :

Elément : Corps, piston et capuchon	Matériau : Polypropylène
Elément : Joint	Matériau : Caoutchouc bromo-butyle (sans latex)
Elément : Lubrifiant	Matériau : Silicone 1000 CST
Elément : Trempage de canule	Matériau : Hexane (avec silicium)

Emballage matériaux :

Emballage primaire : blister	Matériaux : Papier médical + Polytéraphthalate d'éthylène (PET) / polyéthylène à basse densité (LDPE)
Emballage secondaire : boîte	Matériau : carton ondulé

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Perturbateurs endocriniens : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaine :

PARENTERAL

Indications :

La seringue Luer Lock saline préremplie est destinée à la purge (retrait de l'air) ou au rinçage des tubulures notamment de perfusion intraveineuse afin d'empêcher l'obstruction des systèmes d'accès vasculaire et à aider à éliminer tout résidu de médicament ou de sang au niveau du site de cathéter.

Fiche technique

Date : 08/2026 Version 2

2 **PROCEDES DE STERILISATION** : Rayonnements Gamma (pas de résidu d'oxyde d'éthylène)

3 **CONDITIONS DE CONSERVATION** :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Conserver entre +10°C et +40°C

Précautions particulières :


Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

3 ans

4 **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Mode d'emploi :

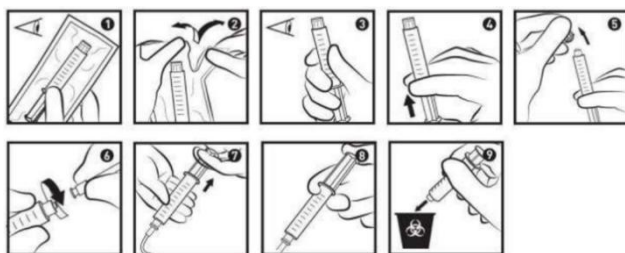

Se référer aux protocoles d'utilisation en vigueur dans la structure médicale (exemples : contrôle de la perméabilité du cathéter, rinçage pulsé, maintien d'une pression positive au retrait d'une aiguille de Huber, ...).

Avant le retrait du bouchon, exercer une légère pression sur le piston (image 4 des schémas d'utilisation ci-dessus) afin de débloquer le joint du piston et obtenir une glisse optimale.

Se référer à la notice.

Contre-indications :

Se référer à la notice.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr